

CHAMBRE D'INHALATION VORTEX



1. UTILISATION

L'utilisation d'une chambre d'inhalation lors d'une thérapie inhalée par aérosols-doseurs permet d'améliorer la déposition pulmonaire.

La chambre d'inhalation Vortex® de PARI est adaptée à tous les âges et supporte la stérilisation.

~ 0 à 18 mois



~ 1 à 4 ans



~ 4 ans et plus



Caractéristiques :

- ~ Antistatique
- ~ Valve bleue qui s'ouvre à l'inspiration et se referme à l'expiration (fuites sur les côtés) pour éviter les pertes de médicament
- ~ Sifflement audible lors d'une respiration trop rapide
- ~ S'adapte à tous les aérosols-doseurs (puffs)



2. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION



Nettoyage

Après chaque utilisation

- ~ Retirer l'embout buccal et, le cas échéant, le masque et autres accessoires



- ~ Placer les pièces dans une bassine d'eau potable chaude (à environ 40°C) mélangée à du liquide vaisselle (1 c. à café de liquide vaisselle pour 3L d'eau potable chaude)



- ~ Durée d'action minimale : 5 minutes
- ~ Remuer les pièces de temps en temps
- ~ Rinçage à l'eau potable courante




- ~ Séchage avec essuie-tout ou essuie vaisselle dédié uniquement à cela
- ~ Conserver dans un endroit sec

Désinfection

1x/semaine

- ~ Dans un stérilisateur de biberon conseillé par votre centre de référence
- ~ Stérilisateur avec option séchage : une fois séchées, laisser les pièces dedans jusqu'à la prochaine utilisation
- ~ Stérilisateur sans séchage : sécher manuellement les pièces avec un essuie-tout ou essuie de vaisselle dédié
- ~ Conserver dans un endroit sec

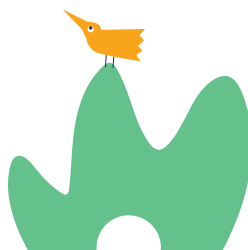

Références :

- ~ <https://www.pari.com/fr/nos-produits/chambre-dinhalation/>
- ~ Bell J, et al. Nebuliser hygiene in cystic fibrosis: evidence-based recommendations. *Breathe* 2020; 16:190328.